


Water Bath

C.O.D Water Bath (C.O.D 수조)

1열

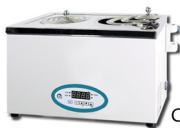

C-WBS-D2



C-WBS-D4



C-WBS-D6



C-WBS-D8



C-WBS-D10



C-WBS-D12

2열



C-WBD12



C-WBD10



C-WBD8





C-WBD6



C-WBD4


지방추출용 Soxhlet Water-Bath으로 사용되고 미생물 배양과 증탕 등 폭넓은 사용이 가능합니다.

- ▶ Flask 혹은 Beaker 사이즈별로 Bath cover에 hole이 뚫려 있고 각 hole 에는 크기별 Open Ring 이 들어감
- ▶ C.O.D Bath 에는 각 hole 숫자에 맞는 clamp 가 기본 포함
- ▶ 내부수조는 SUS304 재질로써 전부 특수 알곤 용접 하여 내구성 확보
- ▶ 외부재질은 철판에 분체코팅하여 미관이 좋고 방청효과가 우수
- ▶ C.O.D Bath 는 2hole부터 12hole 까지 사용자 요구에 적합한 맞춤 제작이 가능

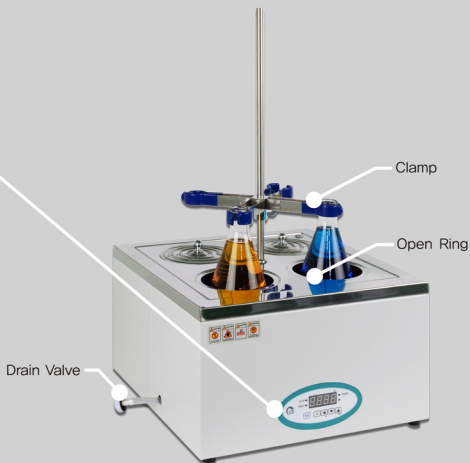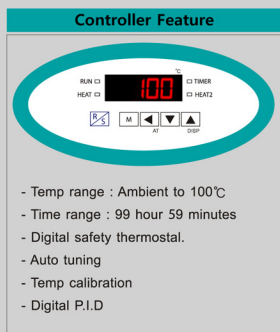




Open Ring
- 용기 size 별 조정

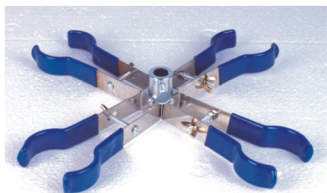

Clamp(십자형)

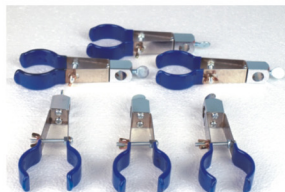

Clamp(일자형)





지방추출용 장비

Clamp 구성

- C-WBS 기준 (1열)
= Hole 수 × 2
- C-WB 기준 (2열)
= Hole 수

Open Ring Set 구성

= Hole 수

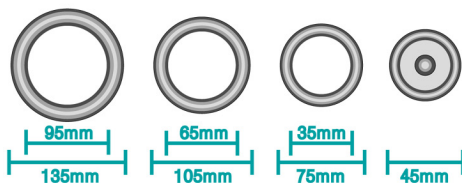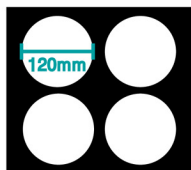

| Model | Dimensions | | Hole. no | Controller | Temp | | Timer | Electrical spec |
|-----------|----------------------|----------------------|----------|---|------------------------------|----------|--|------------------------|
| | Inner (W×D×H)(mm) | Outer (W×D×H)(mm) | | | Range | Accuracy | scale | |
| C-WBS-D12 | 1880×180×120 | 1950×250×240 | 12×1 | Digital Temp Controller & Digital Display / PT 100Q | Ambient +5℃ ~ 100 ℃ | ±1℃ | 99Hr 59Min or 99Min 59Sec or 99Day 23Hr | 220V, 4000W 18A, 1 Ø |
| C-WBD12 | 1020×350×120 | 1090×420×240 | 6×2 | | | | | 220V, 4000W 18A, 1 Ø |
| C-WBS-D10 | 1560×180×120 | 1630×250×240 | 10×1 | | | | | 220V, 3000W 13.6A, 1 Ø |
| C-WBD10 | 860×350×120 | 930×420×240 | 5×2 | | | | | 220V, 3000W 13.6A, 1 Ø |
| C-WBS-D8 | 1240×180×120 | 1310×250×240 | 8×1 | | | | | 220V, 3000W 13.6A, 1 Ø |
| C-WBD8 | 700×350×120 | 770×420×240 | 4×2 | | | | | 220V, 3000W 13.6A, 1 Ø |
| C-WBS-D6 | 920×180×120 | 990×250×240 | 6×1 | | | | | 220V, 2000W 9A, 1 Ø |
| C-WBD6 | 540×350×120 | 610×420×240 | 3×2 | | | | | 220V, 2000W 9A, 1 Ø |
| C-WBS-D4 | 600×180×120 | 670×250×240 | 4×1 | | | | | 220V, 1000W 4.5A, 1 Ø |
| C-WBD4 | 350×350×120 | 420×420×240 | 2×2 | | | | | 220V, 1000W 4.5A, 1 Ø |
| C-WBS-D2 | 350×180×120 | 420×250×240 | 2×1 | | | | | 220V, 1000W 4.5A, 1 Ø |
| C-WBS-A12 | 1880×180×120 | 1950×250×240 | 12×1 | Analog Temp Controller | ±3℃ | × | | 220V, 4000W 18A, 1 Ø |
| C-WBA12 | 1020×350×120 | 1090×420×240 | 6×2 | | | | | 220V, 4000W 18A, 1 Ø |
| C-WBS-A10 | 1560×180×120 | 1630×250×240 | 5×2 | | | | | 220V, 3000W 13.6A, 1 Ø |
| C-WBA10 | 860×350×120 | 930×420×240 | 10×1 | | | | | 220V, 3000W 13.6A, 1 Ø |
| C-WBS-A8 | 1240×180×120 | 1310×250×240 | 8×1 | | | | | 220V, 3000W 13.6A, 1 Ø |
| C-WBA8 | 700×350×120 | 770×420×240 | 4×2 | | | | | 220V, 3000W 13.6A, 1 Ø |
| C-WBS-A6 | 920×180×120 | 990×250×240 | 6×1 | | | | | 220V, 2000W 9A, 1 Ø |
| C-WBA6 | 540×350×120 | 610×420×240 | 3×2 | | | | | 220V, 2000W 9A, 1 Ø |
| C-WBS-A4 | 600×180×120 | 670×250×240 | 4×1 | | | | | 220V, 1000W 4.5A, 1 Ø |
| C-WBA4 | 350×350×120 | 420×420×240 | 2×2 | | | | | 220V, 1000W 4.5A, 1 Ø |
| C-WBS-A2 | 350×180×120 | 420×250×240 | 2×1 | | | | | 220V, 1000W 4.5A, 1 Ø |